



www.it-v.net

HeadSTEP MouthBITE Produktinformation




WARUM

MouthBITE

- + Während der Bestrahlung der Kopf- Halsregion ist eine konstante und reproduzierbare Öffnung des Mundes unerlässlich, um eine präzise Bestrahlung zu gewährleisten (und Nebenwirkungen auf ein Minimum zu reduzieren).
- + Der **MouthBITE** ist ein neuartiges röhrenförmiges Intraoral-Mundstück, mit dem man während der Behandlung durch den Mund atmen kann.
- + Die Geräte bestehen aus einem intraoralen Teil, einem Mittelteil und einer extraoralen, zylindrischen Verlängerung. Es kann zusammen mit thermoplastischen Masken verwendet werden, um den Kopf eines Patienten zu positionieren und zu immobilisieren.
- + Der HeadSTEP **MouthBITE** ist für mehrere Anwendungen an einem Patienten vorgesehen.

MouthBITE round

Der fast schlüsselähnliche intraorale Teil des **MouthBITE round** schränkt die Zungenbewegung ein.

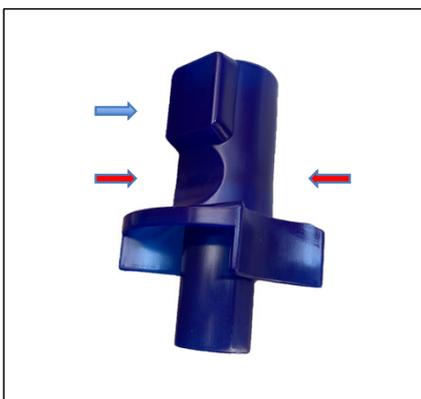

- + intraoraler Teil zur Kompression der Zunge (blauer Pfeil)
- + Mulde für Zähne oder Oberkiefer/Unterkiefer (roter Pfeil)
- + anzuwenden unter der thermoplastischen Maske



- + exakte Reproduzierbarkeit der Kopfposition unter der Maske durch dreidimensionalen Rand (gelber Pfeil)
- + große Öffnung für minimale Behinderung der Atmung (grüner Pfeil)




MouthBITE flat

Aufgrund des abgeflachten intraoralen Teils des **MouthBITE flat** muss der Mund nicht so weit geöffnet werden, was den Patientenkomfort erhöht.



- + flacher intraoraler Teil (blauer Pfeil)
- + Mulde für Zähne oder Kiefer (roter Pfeil)
- + anzuwenden unter der thermoplastischen Maske

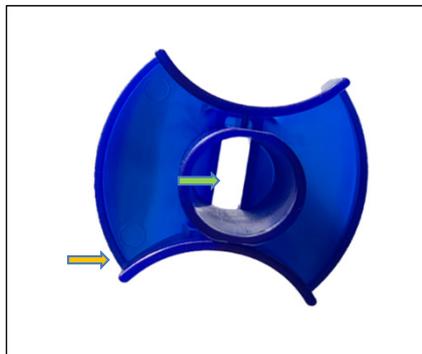

- + Exakte Reproduzierbarkeit der Kopfposition unter der Maske durch dreidimensionalen Rand (gelber Pfeil)
- + große Öffnung für minimale Behinderung der Atmung (grüner Pfeil)

Wie wendet man MouthBITE an?

1. Maske mit Mundloch verwenden
2. Patient MouthBITE in den Mund geben
3. Maske wie gewohnt abformen und extraoralen, zylindrischen Teil des MouthBITE durch das Mundloch stecken



Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben, bitte kontaktieren Sie uns!
Wir beraten Sie gerne und stellen ein unverbindliches Angebot!

officeD@it-v.net

